
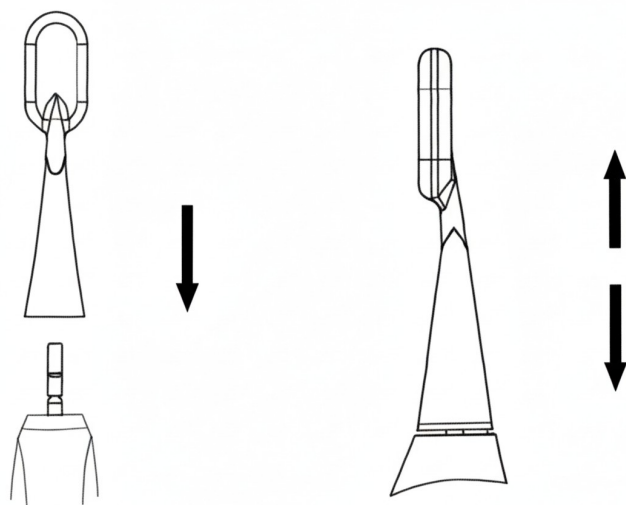


Instrukcja Obsługi w Języku Polskim

Nazwa Produktu:	Elektryczne urządzenie do masażu twarzy i ciała
Model:	TO-014
Moc Znamionowa:	1.5W
Napięcie Znamionowe:	3.7V
Napięcie Wejściowe:	DC5V
Prąd Wejściowy:	500mA
Wejście Zasilacza:	AC100-240V 50/60Hz

Elementy Składowe

1. Główny korpus urządzenia.
2. Głowica masująca 4 szt.
3. Podstawa ładująca.
4. Przewód zasilający.

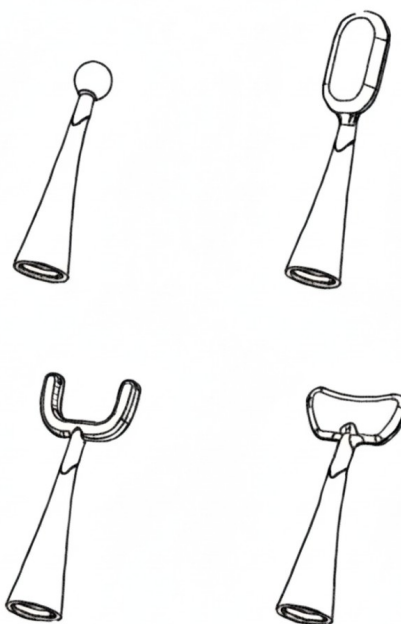

Instalacja Głowicy Masującej

1. Włóż głowicę masującą do otworu głównego korpusu.
2. Lekko dociśnij, aż głowica zatrzaśnie się na miejscu.
3. Aby wyjąć, po prostu pociągnij głowicę masującą.

Funkcje:

Urządzenie oferuje 10000 ruchów wibracyjnych na minutę i 5 trybów masażu do wyboru:

- **A. Tryb wysokiej częstotliwości:** Do masażu ciała.
- **B. Tryb delikatny:** Do masażu skóry.
- **C. Tryb kojący:** Do masażu relaksacyjnego.
- **D. Tryb snu:** Delikatny masaż przed snem.
- **E. Tryb głębokiego snu:** Bardzo delikatny masaż.

Instrukcja Użytkowania

1. Ładowanie:

- Włóż urządzenie do podstawy ładującej i podłącz zasilacz.
- Wskaźnik ładowania świeci się na **czerwono** podczas ładowania i na **zielono** po pełnym naładowaniu.
- Ładowanie trwa około **9 godzin**. W pełni naładowana bateria pozwala na **8 godzin** pracy (2 minuty dziennie przez 240 dni).

2. **Włączanie/Wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

3. **Wybór Trybu:** Po włączeniu naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby przełączać między 5 trybami pracy.

4. **Użycie:** Używaj urządzenia do masażu twarzy, ciała lub skóry głowy.

- **Automatyczne wyłączanie:** Urządzenie wyłączy się automatycznie po **30 sekundach** bezczynności lub po **2 minutach** ciągłego masażu.
- Funkcja **Kinetic memory:** Urządzenie zapamiętuje ostatni używany tryb masażu.

5. **Czyszczenie:** Użyj delikatnego mydła lub roztworu do czyszczenia głowic, a następnie wytrzyj do sucha czystą szmatką.

Ważne Środki Ostrożności i Ostrzeżenia

- **NIE** używaj urządzenia, jeśli masz infekcję, skaleczenia, pęknięcia skóry, opuchliznę, wszczepiony rozrusznik serca lub gdy jesteś w ciąży.
- **NIE** używaj urządzenia pod prysznicem lub w wannie. Jest wodoodporne, ale **NIE** jest wodoszczelne.
- **NIE** używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza do ładowania.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt.
- **Osoby z problemami zdrowotnymi:** Jeśli cierpisz na schorzenia serca, miażdżycę, zakrzepicę lub masz wszczepione implanty metalowe, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- Przestań używać, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort.

Sytuacja

Możliwa Przyczyna

Rozwiązanie

Wskaźnik ładowania nie świeci się.

Słaby kontakt ładowania lub uszkodzenie zasilacza.

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo umieszczone w podstawce. Spróbuj użyć innego gniazdka.

Krótki czas pracy na baterii.

Niska temperatura otoczenia lub urządzenie jest używane zbyt długo.

Naładuj do pełna. Używaj w temperaturze pokojowej.

Urządzenie nie włącza się.

Bateria jest rozładowana.

Podłącz do ładowarki.

Po włączeniu następuje szybkie wyłączenie (po 2 minutach).

Jest to normalna funkcja automatycznego wyłączania.

Włącz ponownie i kontynuuj masaż.

Silna vibracja podczas ładowania.

Zbyt duża moc zasilania.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed ładowaniem.